


Вам потрібно більш стереоскопічне поле зору?

**BQ 900
Стерео-варіатор**



BQ 900 Стерео-варіатор покращує вашу видимість

BQ 900 Стерео-варіатор

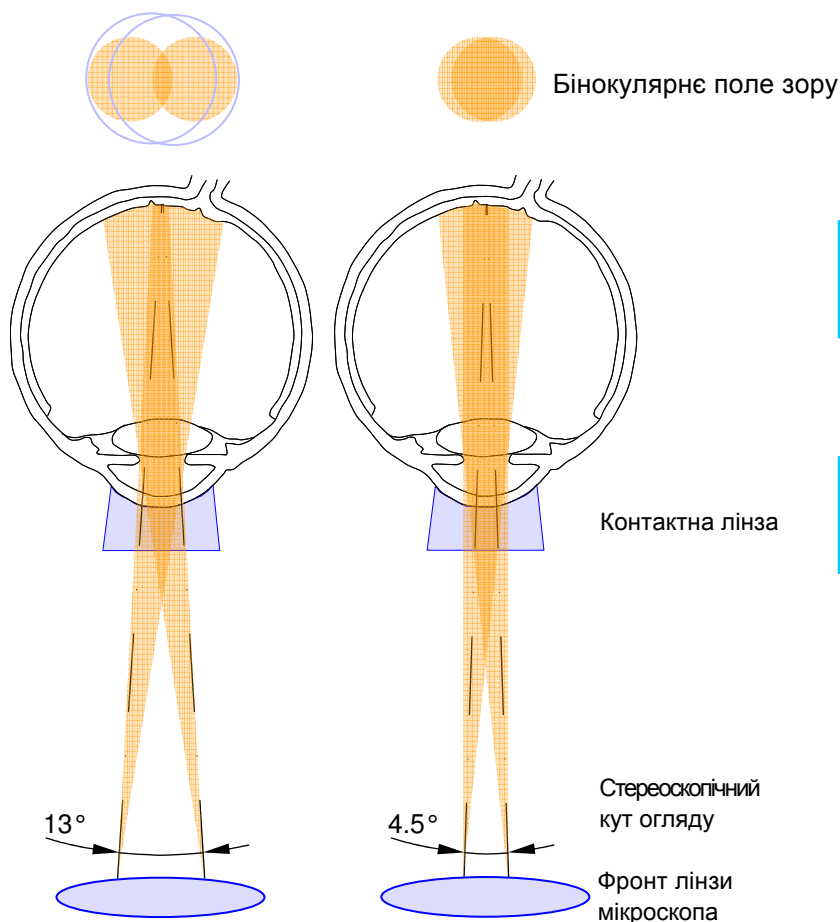

Стереоскопічний огляд задньої камери ока обмежений кількістю світла, що проходить через райдужку. Нормальне стереоскопічне поле зору (сині круги), виходить значно зменшеним до невеликої еліптичної області (зліва кола помаранчевого кольору). Стерео-варіатор звужує базовий стерео кут, отже, збільшує кількість світла, що проходить за райдужну оболонку і призводить до збільшення стереоскопічного поле зору (праворуч помаранчевих кіл), що дозволяє спокійно розгляд задньої камери. Стерео-варіатор є унікальним аксесуаром BQ 900 щілинної лампи від Haag-Streit

BQ 900 Гранично універсальна система щілинної лампи, яка перевершує всі ваші очікування

BQ 900 Стерео-варіатор

- Знижує стерео кут огляду від 13 ° до 4,5 ° (перемикається)
- Збільшує стереоскопічне поле зору
- Створює широкий кут для стереоскопічного вивчення очного дна

Стереоскопічний розгляд склоподібного тіла та очного дна є важливим методом у діагностиці широкого спектра патологій. Одна з проблем, стандартних щілинних ламп в тому, що стереоскопічне поле зору потрапляє значно скороченим для всіх структур за райдужною оболонкою. Звужую стереоскопічний кут огляду, можливо значно збільшити стереоскопічне поле зору. Haag-Streit Стерео варіатор є єдиним пристроєм на ринку, що дозволяє зменшити стерео кут, забезпечуючи блискучі, стереоскопічні зображення всієї структури задньої камери ока.



HS HAAG-STREIT INTERNATIONAL

Precision by Tradition

Ай Пі Медікал
Харків, Україна
Телефон +38 057 750 88 14
Факс +38 057 732 68 70
office@ipmedical.com.ua
www.ipmedical.com.ua

HAAG-STREIT AG
Gartenstadtstrasse 10
CH-3098 Koeniz/Switzerland
Phone +41 31 978 01 11
Fax +41 31 978 02 82
info@haag-streit.ch
www.haag-streit.com